


<b>Código:</b> PROS0000	<b>Edición:</b> PROS0000.0	<b>Fecha:</b> 00/00/2021
<b>Modelo:</b> XXXXXX		
<b>Doc IU:</b> DOC-DIS/0229	<b>Edición:</b> 5	<b>FURIU:</b> 2009/11
<b>Ref Troquel:</b> TRO-PROS-015	<b>Dimensiones:</b> 200 x 134 mm	
<b>Tríptico:</b> NA		

**Colores:**

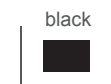

**Aprobación:**

<b>Diseño y Comunicación</b>
<b>Asuntos regulatorios</b>

134 mm

OOGBAD

BAIN OCULAIRE

AUGENBAD

**Larmisoft**<sup>®</sup>

OOGBAD

BAIN OCULAIRE

AUGENBAD

**OFTALMOLOGISCHE OPLOSSING VOOR OOGSPOELING EN VERLICHTING VAN DE OCULAIRE ONGEMAKKEN** (Bevat een oogbad)



**INDICATIES: LARMISOFT OOGBAD** is een oplossing voor het reinigen van oogleden en het verlichten van oogirritatie. Kan gebruikt worden in geval van:

**OOGSPOELING:** Verlicht oculaire ongemakken die te wijten zijn aan lichte irritatie wegens blootstelling aan agressieve bestanddelen zoals rook, stof, airconditioning, droge omgevingen of gevoel van een vreemd element in het oog te hebben. Biedt oculair comfort aan in geval van overmatige inspanning van het gezichtsvermogen (oogvermoeidheid) met computer of televisie schermen, langdurig lezen of na langdurig gebruik van contactlenzen.

**WASSEN VAN OOGLEDEN:** Voor het verwijderen van cosmetische bestanddelen, oogvuil of vuilophoppingen aan de rand van oogleden en wimpers.

**GEBRUIKSAANWIJZING:** Alvorens dit product te gebruiken, dient u uw handen eerst goed te wassen met water en zeep.

**OOGSPOELING:** Enkele druppels van de oplossing op een wattenbolletje doen en voorzichtig het ooglid en de zone rond de ogen reinigen. Een nieuw wattenbolletje gebruiken voor het andere oog. Vul het oogbad met de vloeistof. Het hoofd lichtjes voorover buigen, de randen van het oogbad op uw oogholte plaatsen en beweeg uw hoofd naar achteren zonder de oogleden te sluiten zodat de vloeistof in contact kan treden met het oog. Buig langzaam voor- en achterover, gedurende 30 seconden. De gebruikte vloeistof weggooien, het oogbad opnieuw vullen met de vloeistof en hetzelfde proces herhalen voor het andere oog.

**OOGLEDEN WASSEN:** Enkele druppels van de vloeistof op een wattenbolletje doen en reinig voorzichtig het ooglid en de zone rond de ogen. Een nieuw wattenbolletje gebruiken voor het andere oog.

**Datum van laatste herziening:** 2017/09.

**WAARSCHUWINGEN**

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is.
- Geopende fles niet langer dan 60 dagen gebruiken.
- De oogspoelingsvloeistof in het oogbad weggooien onmiddellijk na gebruik.
- Alvorens een oftalmisch medicijn te gebruiken moet u uw arts informeren dat u dit product gebruikt.
- Elk contact met de schenktuit vermijden om contaminatie te voorkomen.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar of in geval men allergisch is voor één van de bestanddelen.

- De fles goed sluiten.
- Hetzelfde oogbad niet gebruiken met meerdere gebruikers.
- Niet inslikken en buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Op kamertemperatuur bewaren.

**SAMENSTELLING:** Polyhexanide 0,00005% in een Isotonische, gebufferde wateroplossing.

**SOLUTION OPHTALMIQUE POUR LE LAVAGE OCULAIRE ET LE SOULAGEMENT DES GÊNES OCULAIRES.** Baignoire oculaire incluse.



**INDICATIONS : LARMISOFT BAIN OCULAIRE** est une solution qui nettoie et soulage l'irritation des yeux et des paupières. Il peut être utilisé pour :

**LE LAVAGE DES YEUX :** Soulage l'inconfort oculaire causé par les légères irritations dues à l'exposition aux agents agressifs tels que la fumée, la poussière, l'air conditionné, l'atmosphère sèche ou la sensation d'avoir un corps étranger dans l'œil. Dans les situations d'effort visuel excessif (fatigue oculaire), face à l'ordinateur, la télévision, la lecture prolongée ou après le port continu de lentilles de contact, un lavage des yeux restaure le confort oculaire.

**NETTOYAGE DES PAUPIÈRES :** Pour éliminer les dépôts de cosmétiques, les chassies ou les dépôts accumulés sur le bord des paupières et des sourcils.

200 mm

<b>Código:</b> PROS0000	<b>Edición:</b> PROS0000.0	<b>Fecha:</b> 00/00/2021
<b>Modelo:</b> XXXXXX		
<b>Doc IU:</b> DOC-DIS/0229	<b>Edición:</b> 5	<b>FURIU:</b> 2009/11
<b>Ref Troquel:</b> TRO-PROS-015	<b>Dimensiones:</b> 200 x 134 mm	
<b>Tríptico:</b> NA		

**Colores:**

black



**Aprobación:**

<b>Diseño y Comunicación</b>
<b>Asuntos regulatorios</b>

134 mm

<p><b>MODE D'EMPLOI :</b> Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant l'utilisation de ce produit.  <b>LAVAGE OCULAIRE :</b> Appliquer quelques gouttes de produit sur un coton et nettoyer en douceur les paupières et la racine des sourcils. Changer de coton pour l'autre œil. Remplir la baignoire avec la solution. Pencher la tête en avant et appuyer le bord de la baignoire sur le rebord de l'œil et, sans fermer les yeux, incliner la tête vers l'arrière pour que la solution entre en contact avec la surface de l'œil. Pendant 30 secondes faire de légers mouvements de l'avant vers l'arrière. Jeter la solution utilisée, remplir la baignoire à nouveau avec de la solution et répéter le même procédé sur l'autre œil.  <b>HYGIÈNE DES PAUPIÈRES :</b> Appliquer quelques gouttes de produit sur un coton et nettoyer en douceur les paupières et la racine des sourcils. Changer de coton pour l'autre œil.</p> <p><b>Date de la dernière révision :</b> 2017/09</p> <p><b>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est absent ou endommagé.</li> <li>• Bien refermer le flacon après usage.</li> <li>• Jeter le produit contenu dans la baignoire après son utilisation.</li> <li>• Avant d'utiliser un médicament ophtalmique, informer votre médecin du fait que vous utilisez ce produit.</li> <li>• Éviter tout contact avec le bec verseur afin d'exclure tout risque de contamination.</li> <li>• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans, ni en cas d'allergie à certains de ses composants.</li> </ul> <p><b>COMPOSITION :</b> Polyhexanide 0,00005 % dans une solution stérile, isotonique et tamponnée.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas utiliser le flacon au-delà de 60 jours après son ouverture.</li> <li>• Ne pas partager la même baignoire oculaire avec d'autres utilisateur</li> <li>• Ne pas utiliser après la date de péremption.</li> <li>• Ne pas avaler la solution. Ranger hors de portée des enfants.</li> <li>• Conserver à température ambiante.</li> </ul>
<p><b>Lösung zur AUGENSPÜLUNGEN UND LINDERUNG VON AUGENIRRITATIONEN (Enthält ein Augenbad)</b></p>		
<p><b>Anwendung: LARMISOFT Augenbad</b> ist eine Lösung zur Augenpflege, die Augen- und Augenlider reinigt und Reizungen lindert.  <b>AUGENSPÜLUNG:</b> Linderung bei leichten Reizungen der Augen, aufgrund aggressiver Einflüsse wie Rauch, Staub, Klimaanlage, trockene Umgebungsluft oder einem Fremdkörpergefühl. Bietet Komfort für ermüdete Augen in Fällen von übermäßiger Arbeit an Computer- oder Fernsehbildschirmen, andauerndem Lesen oder nach längerem Gebrauch von Kontaktlinsen.  <b>REINIGUNG DER AUGENLIDER:</b> Zur Entfernung von Kosmetika, wasserlöslichen Sekreten und Ablagerungen am Rand des Augenlids und der Wimpern.</p> <p><b>GEBRAUCHSANWEISUNG:</b> Hände gründlich mit Seife waschen und abtrocknen, bevor Sie das Produkt verwenden.  <b>AUGENSPÜLUNG:</b> Einige Tropfen der Lösung auf etwas Watte auftragen und sanft das Augenlid und den Augenbereich reinigen. Wechseln Sie die Watte vor dem Gebrauch am anderen Auge.  Füllen Sie das Augenbad mit der Lösung. Den Kopf leicht nach vorne neigen, den Rand des Gefäßes auf die Augenhöhle legen und, ohne die Augenlider zu schließen, den Kopf nach hinten legen. So ist gewährleistet, dass die Lösung die Oberfläche des Auges benetzt. 30 Sekunden lang, langsame Neigungen nach vorne und hinten machen. Die gebrauchte Lösung entfernen, das Gefäß wieder mit sauberer Lösung füllen und mit dem anderen Auge genauso verfahren.  <b>REINIGUNG DER AUGENLIDERS:</b> Einige Tropfen der Lösung auf etwas Watte auftragen und sanft das Augenlid und den Augenbereich reinigen. Wechseln Sie die Watte vor dem Gebrauch am anderen Auge.</p>		
<p><b>Datum der letzten Neubearbeitung:</b> 2017/09</p> <p><b>WARNHINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung vor dem ersten Gebrauch fehlt oder beschädigt ist.</li> <li>• Die gebrauchte Lösung aus dem Gefäß muss sofort nach dem Gebrauch entsorgt werden.</li> <li>• Das Gefäß für die Augenwäsche darf nicht von mehreren Personen verwendet werden.</li> <li>• Informieren Sie vor der Verwendung eines Augenmedikamentes Ihren Arzt, dass Sie dieses Produkt verwenden.</li> <li>• Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</li> <li>• Das Produkt nicht verwenden, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist.</li> <li>• Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren. Für Kinder unter 3 Jahren ist die Anwendung des Produktes untersagt.</li> </ul> <p><b>ZUSAMMENSETZUNG:</b> Polyhexanide 0,00005% in isotonischer, gepufferten und sterilen Lösung.</p>		



200 mm

AP-0476-V01